


# Dây truyền máu TERUFUSION



## <CẢNH BÁO>

- Thiết bị này chứa DEHP. Dựa trên các nghiên cứu trên động vật, việc tiếp xúc với DEHP đáng kể có thể gây trở ngại cho sự phát triển bình thường của hệ thống sinh dục nam. Đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, có thể xem xét thay thế các thiết bị khác.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao gói sản phẩm bị hỏng
- Không sử dụng sản phẩm nếu các đầu bảo vệ thiết bị bị lỏng hoặc tháo rời
- Không lưu trữ sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao
- Sản phẩm sử dụng 1 lần. Không được tái sử dụng
- Không tiệt trùng lại. Không tái chế
- Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị.

## <HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG>

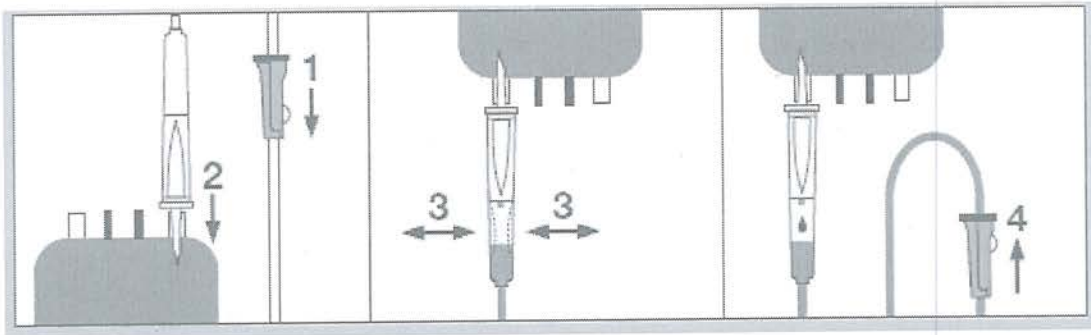

- Khóa đường truyền bằng con lăn trên dây truyền máu, sau đó tháo nắp bảo đầu nhọn rồi cắm sâu vào túi máu theo hướng thẳng.
- Đảm bảo túi máu đã được liên kết chặt chẽ với dây truyền máu. Dùng ngón tay bóp nhẹ vào bầu đếm giọt của dây truyền máu để máu lưu thông chảy về bầu đếm giọt đến một nửa bầu.
- Mở khóa đường truyền, tới khi máu lưu thông chảy đến đầu kim thì khóa đường truyền lại.
- Mở nắp bảo vệ ở đầu kim. Thực hiện lấy ven.
- Mở khóa đường truyền để bắt đầu quá trình truyền máu.



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan  
Phone : 81-3-3374-8111


# TERUFUSION Blood Administration Set

---

## <PRECAUTIONS>

- This device contains DEHP. Based on animal studies, significant exposure to DEHP may interfere with the normal development of the male reproductive tract. For children, pregnant and nursing women, alternative devices may be appropriate.
- Do not use if unit package is damaged.
- Do not use if protective caps are loose or displaced.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Dispose of safely after single use to avoid risk of infection.
- For single use only. Do not reuse.
- Do not re-sterilize. Do not reprocess.
- Reprocessing may compromise the sterility, biocompatibility and functional integrity of the device.

## <INSTRUCTION FOR USE>

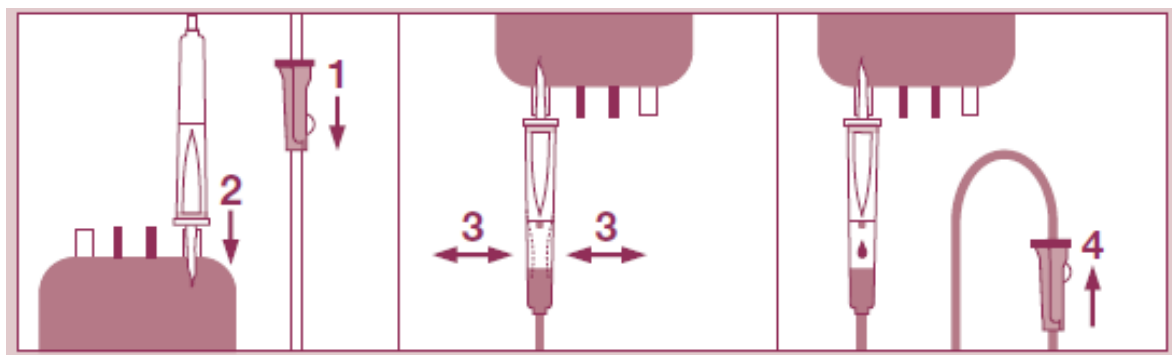

- Close the roller clamp, then remove the protector from the spike and insert it perpendicularly and to its full depth into the blood bag.
- Suspend the blood bag connected with the blood administration set. Squeeze the drip chamber slowly with your fingers to fill it about half full with blood.
- Open the roller clamp. Make sure that the blood has filled up to the end of this set, then close the clamp.
- Remove the protector from the needle by pulling straight. Perform venipuncture and secure the needle to the skin.
- Open the roller clamp and start the transfusion.



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan

Phone : 81-3-3374-8111