

KIM NHA KHOA

TERUMO DENTAL NEEDLE

- Đầu kim siêu nhỏ
- Kim có độ bền cao
- Độ chắc chắn đáng tin cậy
- Hiển thị trực tiếp hữu ích
- Đóng gói riêng biệt



Đầu kim siêu nhỏ

Hạn chế cảm giác khó chịu và ít gây đau cho bệnh nhân.

Kim có độ bền cao

Khó gãy, ngay cả khi bệnh nhân phản ứng mạnh trong quá trình tiêm.

Độ chắc chắn đáng tin cậy


Vì chốt kim có thể vận trực tiếp và chắc chắn vào ống tiêm nên sẽ không xảy ra rủi ro bị rơi rớt hoặc rò rỉ.

Hiện thị trực xiên hữu ích

Hình ảnh mũi tên trên trục kim, giúp căn chỉnh góc xiên của kim để đưa kim vào dễ dàng hơn.


Đóng gói riêng biệt

Đóng gói riêng biệt với niêm phong bằng chất liệu nhựa đặc biệt.

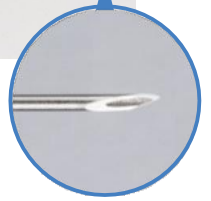


Hướng dẫn sử dụng

1

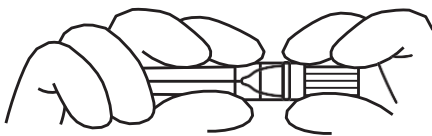


Để mở kim, phá tem chống giả sau một tiếng "Snap". Không sử dụng nếu tem có dấu hiệu bị hỏng trước đó.

2

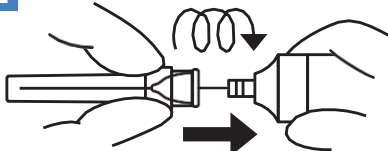

Gắn kim vào ống tiêm bằng cách dùng vỏ hộp làm cờ lê để vận chốt kim vào ống tiêm.

3

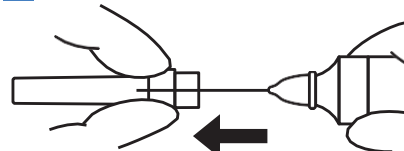

Ngay trước khi tiêm, tháo vỏ bọc để lộ kim.

Bảng kích thước kim ngắn và dài

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Cỡ kim	Độ dài mm	Màu mã sản phẩm	Screw	Chất liệu	
					Kim	Đốc kim
DN*M2541	25G	41mm	Cam	Inch	Thép không gỉ	PP
DN*M2721	27G	21mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M2722	27G	22mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M2730	27G	30mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M2735	27G	35mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M2741	27G	41mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M3016	30G	16mm	Vàng	Inch		
DN*M3019	30G	19mm	Vàng	Inch		
DN*M3021	30G	21mm	Vàng	Inch		
DN*M3022	30G	22mm	Vàng	Inch		
DN*M2508F	25G	08mm	Cam	mm		
DN*M2535F	25G	35mm	Cam	mm		
DN*M2716F	27G	16mm	Xám nhạt	mm		
DN*M2721B	27G	21mm	Xám nhạt	mm		
DN*M2721F	27G	21mm	Xám nhạt	mm		
DN*M2735B	27G	35mm	Xám nhạt	mm		
DN*M2735Q	27G	35mm	Xám nhạt	Inch		
DN*M3013B	30G	13mm	Vàng	mm		
DN*M3013Q	30G	13mm	Vàng	Inch		
DN*M3013F	30G	13mm	Vàng	mm		
DN*M3016B	30G	16mm	Vàng	mm		
DN*M3016F	30G	16mm	Vàng	mm		
DN*M3021B	30G	21mm	Vàng	mm		
DN*M3021F	30G	21mm	Vàng	mm		
DN*M3021Q	30G	21mm	Vàng	Inch		
DN*M2721A	27G	21mm	Trắng	Inch		
DN*M2722A01	27G	22mm	Trắng	Inch		
DN*M2730A	27G	30mm	Trắng	Inch		
DN*M2735A	27G	35mm	Trắng	Inch		
DN*M3013A	30G	13mm	Trắng	Inch		
DN*M3019A	30G	19mm	Trắng	Inch		
DN*M3021A	30G	21mm	Trắng	Inch		

- Đơn vị tính: 100 chiếc/hộp.
- Thùng vận chuyển: 2000 chiếc.
- Khử trùng bằng khí ethylene oxide.
- Chất liệu: Kim : Thép không gỉ, đốc kim:PP

AIR WATER REALIZE INC.
1320-5, Nagatoro, Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1712 Nhật Bản
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN

Không phải tất cả các thông số kỹ thuật được mô tả trong danh mục này đều được đăng ký và chấp thuận để bán ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Chỉ định sử dụng cũng có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng liên hệ với đại diện quốc gia của bạn để biết thêm thông tin và tính khả dụng của sản phẩm.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám,
phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Tất cả tên thương hiệu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của
TẬP ĐOÀN TERUMO và chủ sở hữu tương ứng.



Đăng ký bởi **TERUMO CORPORATION** 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 www.terumo.co.jp

Terumo Vietnam 2024