

## Insulin


Dòng sản phẩm bơm tiêm insulin của chúng tôi mang đến cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường sự thoải mái và chính xác khi tự tiêm hàng ngày,

- Độ sắc bén vượt trội của kim tiêm và chuyển động trơn tru của pittông tạo cảm giác thoải mái hơn khi tiêm thuốc.
- Vạch chia độ được tô đậm, rõ ràng giúp bảo đảm liều tiêm chính xác.
- Kích thước đa dạng.

# Bơm tiêm Insulin

## Bơm tiêm insulin tiêu chuẩn Terumo

Chuyển động trơn tru của pít tông và không gian chết tối thiểu giúp giảm bớt cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Chất liệu bán trong suốt và vạch in rõ ràng trên ống tiêm cho phép người dùng tiêm chính xác lượng insulin cần thiết. Công nghệ làm thành kim siêu mỏng cho tốc độ dòng chảy tối đa. Thời gian tiêm được rút ngắn khiến người dùng hầu như không có cảm giác đau. Bề mặt kim được phủ silicon để giảm thiểu lực cản khi đâm kim. Thân ống tiêm, pít tông và nắp được làm bằng nhựa PP. Kim tiêm được sản xuất bằng ống thép không gỉ SUS 304. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8537.

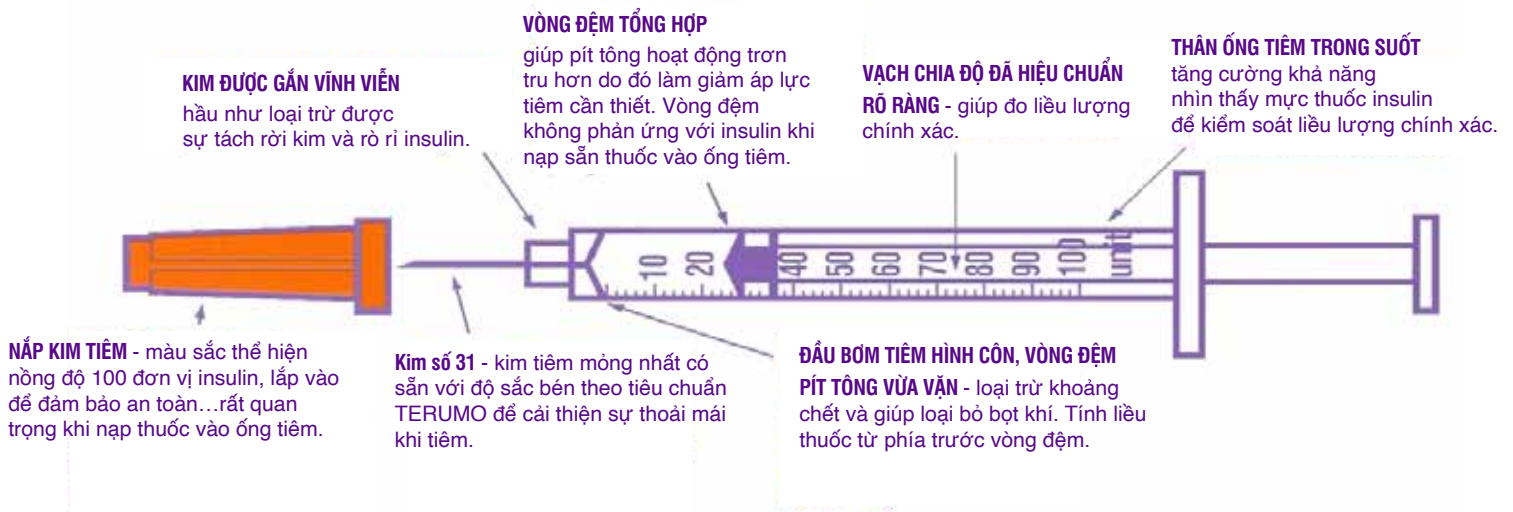

### • Thông số kỹ thuật của bơm tiêm

Loại bơm tiêm	Chiều dài thân ống tiêm (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều dài nắp (mm)
1.0mL	81.4	6.73	4.5	26
0.5mL	75.1	5.50	3.36	26

### • Thông số kỹ thuật của kim tiêm

Gauge (G)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (tối thiểu: mm)	Chiều dài (mm)
31	0.254 - 0.267	0.114	8mm (5/16")
30	0.298 - 0.320	0.113	

### Mã sản phẩm

SS\*10M3108KS  
SS\*10M3008KS  
SS\*5M3108KS  
SS\*5M3008KS

### Mô tả

31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0,02cc, 2 đơn vị insulin  
31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0,02cc, 2 đơn vị insulin  
31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0,01cc, 1 đơn vị insulin  
31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0,01cc, 1 đơn vị insulin

**Đóng gói:**  
**100 bơm tiêm/hộp**  
**tiệt trùng bằng**  
**Ethylene oxide**

Số lưu hành: 230001713/PCBB-HN  
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.  
Hãng sản xuất: Tae-Chang Industrial Co., Ltd.  
Sản xuất tại: Hàn Quốc

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 033/25-CKQC-Terumo

**TERUMO**

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM  
Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường  
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại: +84 24 3936 1643  
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM  
Chi nhánh TP. HCM  
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách  
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt  
Nam.  
Điện thoại: +84 28 6660 0326

CE  
0120

TVME-2503-021