

Tăng nồng độ hematocrit của bệnh nhân với sự lựa chọn phù hợp



Lê Thu Hà
Trưởng phòng đăng ký
và quản lý chất lượng

Digitally signed by CÔNG TY
TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT
NAM
DN: c=VN, st=THÀNH PHỐ HÀ
NỘI, cn=CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ
Y TẾ TERUMO VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0105881933
Date: 2025.07.04 13:37:30 +07'00'

Cung cấp đầy đủ các lựa chọn dùng để cô đặc máu, tăng hematocrit, lượng tiểu cầu và các thành phần huyết tương.



Technology inspired for life.™

MEDICA

TERUMO
CARDIOVASCULAR

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 2500846ĐKLH/BYT-HTTB

Chủ sở hữu số lưu hành: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng
Cầu, P. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Nhà sản xuất: Medica Méditerranée s.a.r.l. và SAR-MED S.r.l.

Sản xuất tại: Tunisia và Ý

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 098/25-
CKQC-Terumo

TVME-2507-069

Quả lọc máu và bộ quả lọc máu



Thiết kế không rửa lại

Thiết lập ngay lập tức với quả lọc máu đã được rửa trước, lý tưởng cho các trường hợp khẩn cấp trong quá trình phẫu thuật.




Thể tích mồi thấp

Giảm loãng máu như những gì phổi nhân tạo oxy Terumo Capiox® luôn làm. Chỉ 21 mL cho trẻ em và 49 mL cho người lớn.



Hiệu quả cao

Màng Purema® và Polysulfone cung cấp tốc độ siêu lọc (UFR) cao để cô đặc máu hiệu quả.

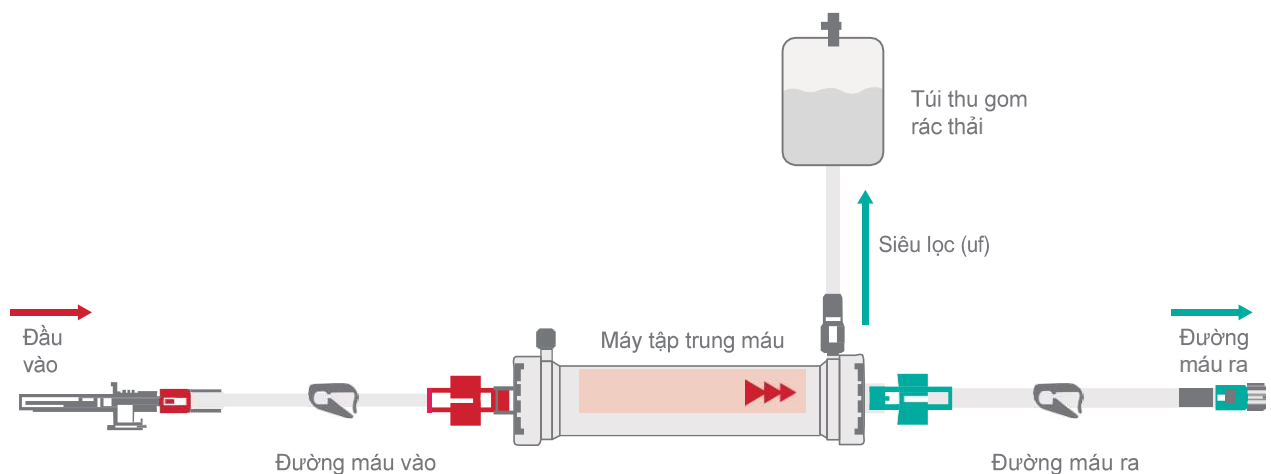

Quả lọc máu với thể tích mồi thấp

Quả lọc máu dành cho người lớn

Quả lọc máu dành cho người lớn có thể tích mồi thấp - 49 mL với diện tích bề mặt 0,7m².

	Capiox	Medica
Mã mặt hàng	HC11	DP07HC
Diện tích bề mặt	1,1 m ²	0,7 m ²
Thể tích mồi	67 mL	49 mL

Quả lọc máu dành cho trẻ sơ sinh/ trẻ em

Quả lọc máu dành cho người lớn có thể tích mồi thấp - 21 mL với diện tích bề mặt 0,3m².


	Capiox	Medica
Mã mặt hàng	HC05	DP03HC
Diện tích bề mặt	0,5 m ²	0,3 m ²
Thể tích mồi	34 mL	21 mL

Hiệu quả lọc


Bộ lọc	DP03				DP12			
Các yếu tố	Urê	Creatinin	Phosphate	Vit. B12	Urê	Creatinin	Phosphate	Vit. B12
Độ giải phóng mặt bằng ở Qb = 100 ml / phút; Qd 500 = ml / phút; Quf = 10 ml / phút								
Trung bình	70,8	63,4	55,4	48,1	-	-	-	-
Std. Dev.	2,9	2,1	1,9	1,7	-	-	-	-
Giải phóng mặt bằng tại Qb = 200 ml / phút; Qd 500 = ml / phút; Quf = 10 ml / phút								
Trung bình	114,4	100,2	84,2	58,0	184,0	175,4	163,0	112,6
Std. Dev.	3,0	4,2	3,2	5,5	4,6	5,0	3,7	3,7
Độ rảnh ở Qb = 300 ml / phút; Qd 500 = ml / phút; Quf = 10 ml / phút								
Trung bình	132,7	110,0	93,8	68,8	246,6	219,2	200,8	131,0
Std. Dev.	2,9	3,5	3,8	3,0	5,1	3,4	3,1	3,0
Giải phóng mặt bằng ở Qb = 400 ml / phút; Qd 500 = ml / phút; Quf = 10 ml / phút								
Trung bình	-	-	-	-	276,4	242,9	218,9	157,5
Std. Dev.	-	-	-	-	3,9	3,1	2,2	3,2

Qb ml / phút = Tốc độ lưu lượng máu; Qd ml / phút = Tốc độ dòng chảy lọc máu; QUF = Siêu lọc

DP03HC

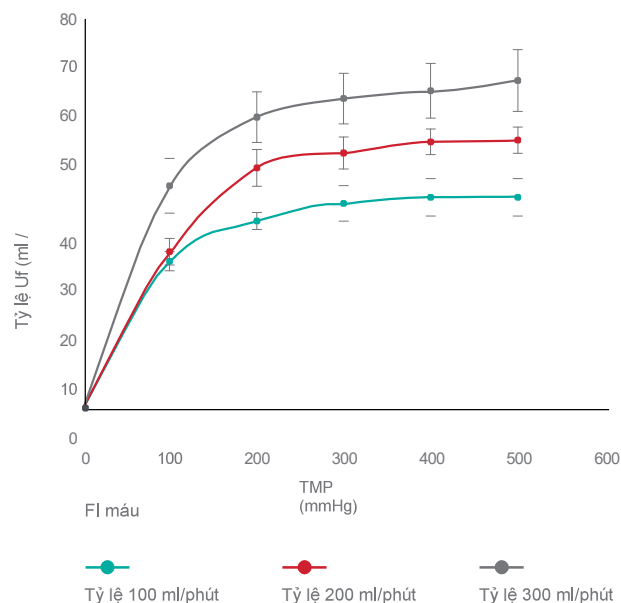

DP12HC

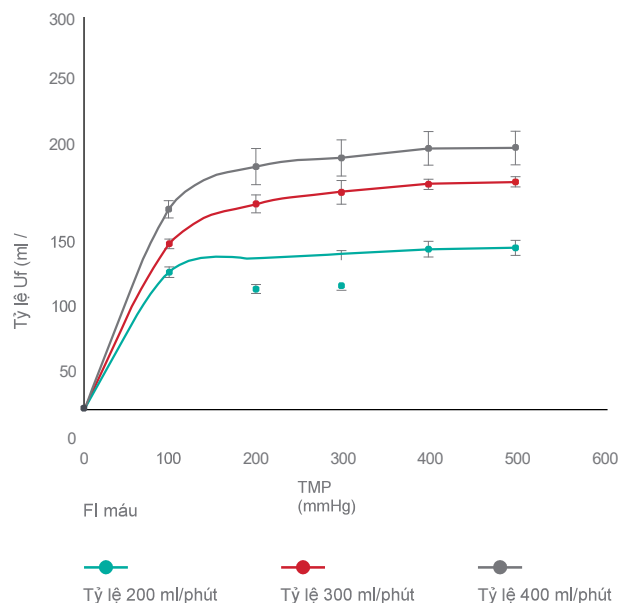

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Quả lọc máu cho trẻ sơ sinh / trẻ em

Tên sản phẩm	D050	D150	DP03HC*
Mục đích sử dụng	Trẻ sơ sinh	Nhi khoa	Nhi khoa
Vật liệu sợi rỗng	Polysulfone	Polysulfone	Purema® Polythersulfone
Diện tích màng (m ²)	0,075 m ²	0,25 m ²	0,3 m ²
Thể tích môi (ml)	5	19	21
Các đầu nối ống dẫn máu	MLL	Khóa xoắn	Khóa xoắn
Các đầu nối ống dẫn máu	FLL	FLL	FLL
KUF ml / h / mmHg	1.3	5.5	14
Bộ tập trung máu			
Chiều dài ống đầu vào và đầu ra (mm)		500	
Đường kính ống đầu vào và đầu ra (mm)	Ø 3,5 (int) x Ø 5,5 (ext)	Ø 4,3 (int) x Ø 6,8 (ext)	Ø 4,3 (int) x Ø 6,8 (ext)
Chiều dài ống siêu lọc (mm)		900 (uf)	
Túi đựng chất thải (ml)		500	

Quả lọc máu cho người lớn - Kết nối dịch lọc khóa luer nữ *

Tên sản phẩm	DP07HC	DP09HC	DP12HC	DP15HC
Vật liệu sợi rỗng	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone
Diện tích màng (m ²)	0.7	0.9	1.2	1.5
Thể tích môi (ml)	49	57	75	87
KUF ml / h / mmHg	32	41	55	63
Chiều dài đơn vị (mm)	180	180	265	265
Bộ tập trung máu				
Chiều dài ống đầu vào và đầu ra (mm)			1000	
Đường kính ống đầu vào và đầu ra (mm)			Ø 4,3 (int) x Ø 6,8 (ext)	
Chiều dài ống siêu lọc (mm)			900 (uf)	
Túi đựng chất thải (ml)			2000	

Quả lọc máu cho người lớn - Kết nối dịch lọc kiểu Hansen **

Tên sản phẩm	DP60HC	DP120HC	DP150HC	DP190HC	DP230 HC
Vật liệu sợi rỗng	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone	Purema® Polythersulfone
Diện tích màng (m ²)	0.6	1.2	1.5	1.9	2.3
Thể tích môi (ml)	39	69	87	115	133
KUF ml / h / mmHg	28	55	63	75	87
Chiều dài đơn vị (mm)	180	300	300	300	300
Bộ tập trung máu					
Chiều dài ống đầu vào và đầu ra (mm)			1000		
Đường kính ống đầu vào và đầu ra (mm)			Ø 4,3 (int) x Ø 6,8 (ext)		
Chiều dài ống siêu lọc (mm)			900 (uf)		
Túi đựng chất thải (ml)			2000		

Tất cả quả lọc máu áp lực tối đa là 600 mmHg. Phạm vi lưu lượng máu 100-400 mL / phút.

* Độ dày thành sợi 30 µm. Đường kính trong sợi 200µm ** Độ dày thành sợi 30 µm. Đường kính trong sợi 200µm

Thông tin đặt hàng



Quả lọc máu cho trẻ sơ sinh

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M03665	D050 0.075m ² Máy tập trung máu	Phương pháp chiếu xạ	120

Quả lọc máu cho trẻ em

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M03098	D150 0.25m ² Máy tập trung máu	Phương pháp chiếu xạ	48
M03967	DP03HC 0.3m ² Máy tạo máu	Phương pháp chiếu xạ	80
M03957	DP03HC 0.3m ² Máy tạo máu	EO	80

Quả lọc máu cho người lớn – kiểu khóa luer nữ

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M03968	Máy tập trung máu DP07HC 0,7m ²	Phương pháp chiếu xạ	48
M03958	Máy tập trung máu DP07HC 0,7m ²	EO	6
M03969	DP09HC 0,9m ² Máy tập trung máu	Phương pháp chiếu xạ	48
M03959	DP09HC 0,9m ² Máy tập trung máu	EO	6
M03970	Máy tập trung máu DP12HC 1.2m ²	Phương pháp chiếu xạ	48
M03960	Máy tập trung máu DP12HC 1.2m ²	EO	6
M03971	Máy tập trung máu DP15HC 1.5m ²	Phương pháp chiếu xạ	48
M03961	Máy tập trung máu DP15HC 1.5m ²	EO	6

Quả lọc máu cho người lớn – kết nối kiểu hansen

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M03972	Máy tập trung máu DP60HC 0,6m ²	Phương pháp chiếu xạ	40
M03962	Máy tập trung máu DP60HC 0,6m ²	EO	5
M03973	DP120HC 1,2m ² Máy tập trung máu	Phương pháp chiếu xạ	28
M03963	DP120HC 1,2m ² Máy tập trung máu	EO	28
M03974	DP150HC Máy tập trung máu 1,5m ²	Phương pháp chiếu xạ	28
M03964	DP150HC Máy tập trung máu 1,5m ²	EO	28
M03975	DP190HC Máy tập trung máu 1,9m ²	Phương pháp chiếu xạ	20
M03965	DP190HC Máy tập trung máu 1,9m ²	EO	28
M03976	DP230HC Máy tập trung máu 2,3m ²	Phương pháp chiếu xạ	20
M03966	DP230HC Máy tập trung máu 2,3m ²	EO	20

Thông tin đặt hàng



Bộ quả lọc máu



Giá đỡ máy tập trung máu

Quả lọc máu cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M03738	D050 SET Bộ tập trung máu 0.075m ²	Phương pháp chiếu xạ	40
M03320	D150 SET Bộ tập trung máu 0.25m ²	Phương pháp chiếu xạ	25
M90006	DP03SET Bộ tập trung huyết lượng 0,3m ²	Phương pháp chiếu xạ	25

Quả lọc máu cho người lớn – kiểu khóa luer nữ

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M90007	Bộ tập trung máu DP07 0.7m ²	Phương pháp chiếu xạ	25
M90008	DP09 SET Bộ tập trung máu 0.9m ²	Phương pháp chiếu xạ	25
M90009	Bộ tập trung máu DP12 1.2m ²	Phương pháp chiếu xạ	12
M90010	Bộ tập trung máu DP15 1.5m ²	Phương pháp chiếu xạ	12

Quả lọc máu cho người lớn – kết nối kiểu hansen

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Phương pháp khử trùng	Đơn vị / Thùng carton
M90011	Bộ tập trung máu DP60 0.6m ²	Phương pháp chiếu xạ	25
M90012	DP120SET Bộ tập trung máu 1,2m ²	Phương pháp chiếu xạ	12
M90013	Bộ tập trung máu DP150 1.5m ²	Phương pháp chiếu xạ	15
M90014	DP190SET Bộ tập trung máu 1,9m ²	Phương pháp chiếu xạ	12
M90015	Bộ tập trung máu DP230 2.3m ²	Phương pháp chiếu xạ	12

Giá đỡ Quả lọc máu

Mã đặt hàng	Mô tả Sản phẩm	Đơn vị / Thùng carton
M26521-SP	Giá đỡ máy tập trung máu	1

Phân phối bởi

TERUMO
CARDIOVASCULAR

Sản xuất bởi

MEDICA

TERUMO ASIA HOLDINGS PTE. LTD.

300 Đường Beach, # 33-03,
Phòng chờ Singapore 199555
Điện thoại: +65.6.295.1792 Fax: +65.6.294.2329
<https://terumo-asiapacific.com>