

*Outlook*TM

Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não,
mạch ngoại biên




Outlook™

Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên

Lưu lượng dòng chảy cao, linh hoạt và chống xoắn tốt, thành ống mảnh và chắc chắn


- Vật liệu cứng: các loại polyamide khác nhau trong cấu trúc ống 03 lớp và thiết kế sợi bện kép đặc biệt mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng và khả năng chống xoắn.
- Đầu gàn linh hoạt mang lại khả năng dẫn truyền thẳng và lực hỗ trợ/khả năng định hình tối ưu, trong khi vẫn nâng cao độ an toàn cho mạch máu.
- Cấu trúc thành ống siêu mỏng cho phép đường kính trong lớn hơn và đường kính ngoài nhỏ hơn, giúp tăng tốc độ dòng chảy:
 - Tương thích với dây dẫn 0.038".
 - Tốc độ dòng chảy tối đa cho ống thông 4 Fr: 15 ml/giây; 5 Fr: 23ml/giây
 - Giới hạn áp lực tối đa: 1200 psi (8.274 kPa)
- Đầu vào mềm mại.

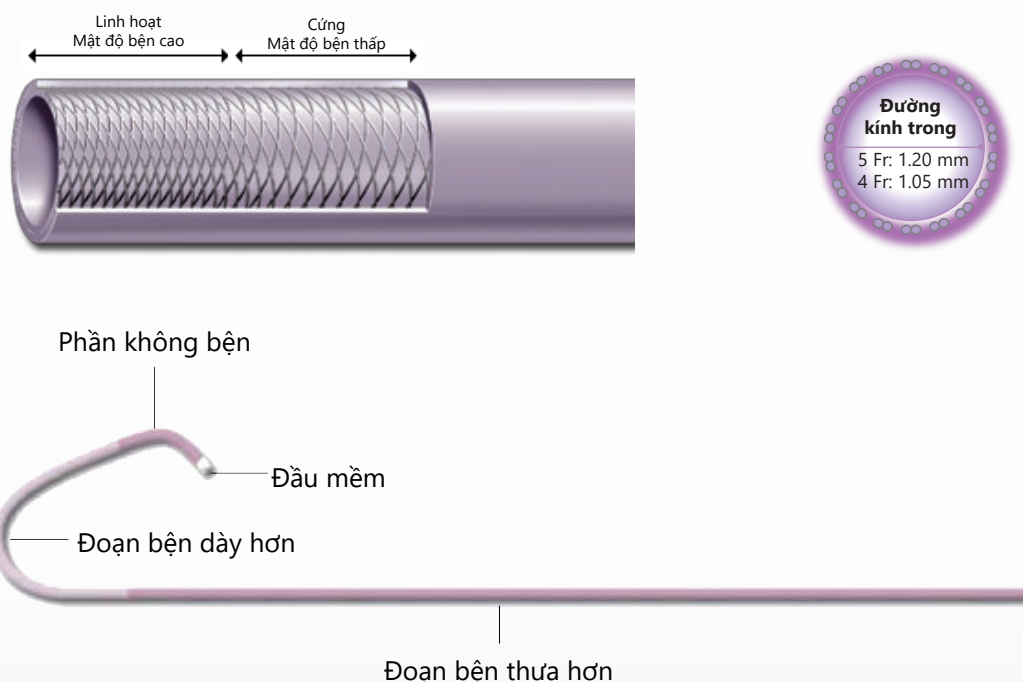

Outlook[™]

Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên

- Terumo OUTLOOK đặt ra một tiêu chuẩn mới trong thiết kế ống thông. Với các đặc tính vượt trội như: kiểm soát lực xoay hiệu quả, tối thiểu hóa nguy cơ tổn thương thành mạch và hạn chế xâm lấn trong quá trình chụp mạch, giúp cho OUTLOOK trở thành thiết bị lý tưởng trong các quy trình thường quy.
- Đường cong Tiger và BLK cho phép chụp cả mạch vành trái và phải thông qua tiếp cận động mạch cánh tay hoặc động mạch quay.

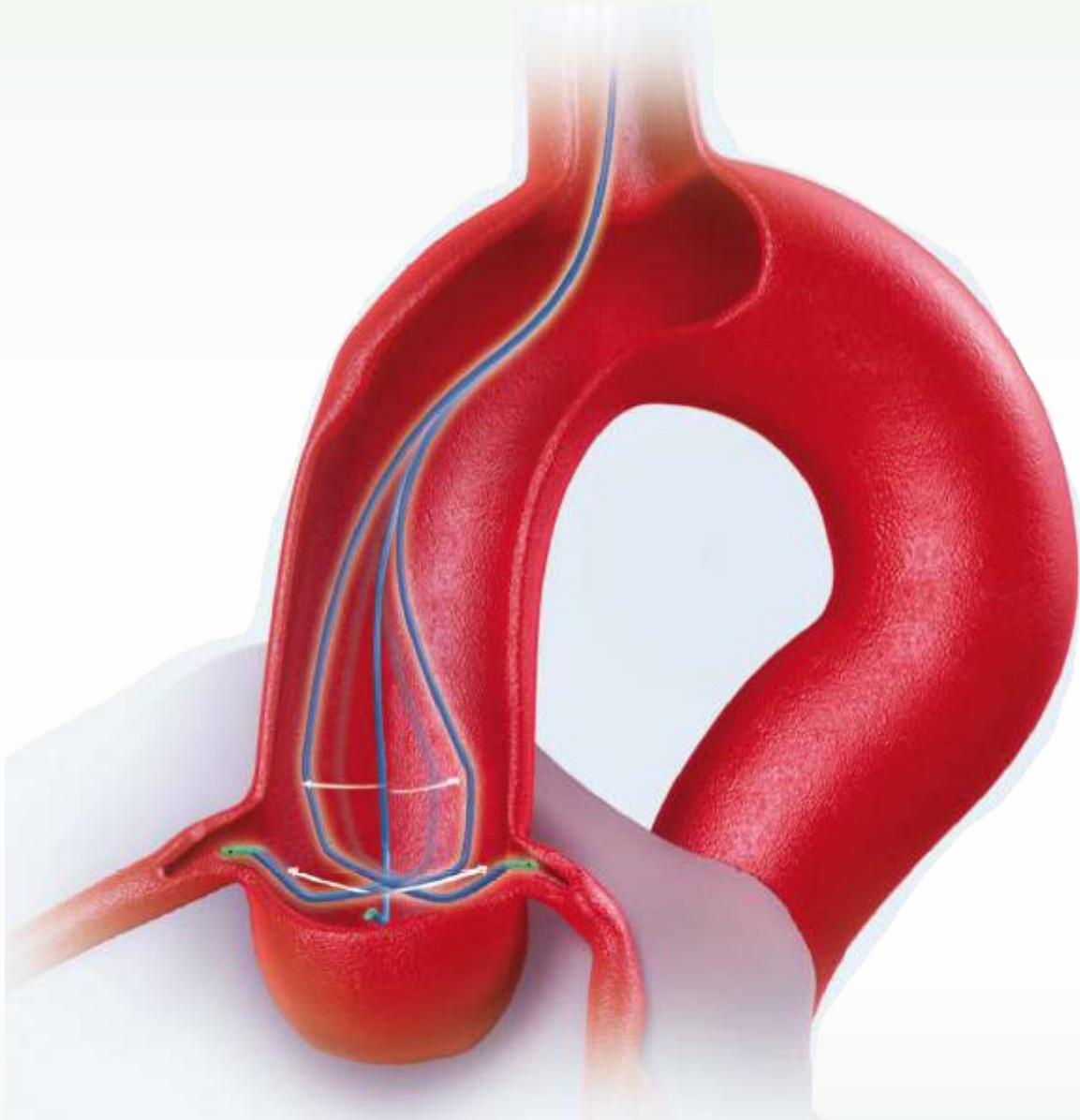

Hệ thống can thiệp Terumo **cam kết mang lại** thành công với các giải pháp thủ thuật cải tiến và sự hỗ trợ liên tục trong cả những trường hợp thử thách.

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm phương pháp mới nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả, từ đó đạt được các **kết quả tốt hơn cho nhiều bệnh nhân hơn.**

PUSHING BOUNDARIES



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại	Hình dạng đầu	Kiểu	Lỗ bên	Chiều dài	Mã sản phẩm	Mã sản phẩm
					4Fr / 1.40 mm	5Fr / 1.70 mm
Amplatz Left		Small	0	100 cm	RQ*4AL1000M	RQ*5AL1000M
		Middle	0	100 cm	RQ*4AL2000M	RQ*5AL2000M
Amplatz Right		Small	0	100 cm	RQ*4AR1000M	RQ*5AR1000M
		Middle	0	100 cm	RQ*4AR2000M	RQ*5AR2000M
		Large	0	100 cm	RQ*4AR3000M	RQ*5AR3000M
Judkins Left		Curve 3.5cm	0	100 cm	RQ*4JL3500M	RQ*5JL3500M
		Curve 4.0cm	0	100 cm	RQ*4JL4000M	RQ*5JL4000M
		Curve 5.0cm	0	100 cm	RQ*4JL5000M	RQ*5JL5000M
Judkins Right		Curve 3.5cm	0	100 cm	RQ*4JR3500M	RQ*5JR3500M
		Curve 4.0cm	0	100 cm	RQ*4JR4000M	RQ*5JR4000M
		Curve 5.0cm	0	100 cm	RQ*4JR5000M	RQ*5JR5000M
Multipurpose		Curve 2.5cm	2	100 cm	RQ*4MP2520M	RQ*5MP2520M
		Curve 2.5cm	2	80 cm	RQ*4MP2528M	-
		Curve 3.0cm	2	100 cm	RQ*4MP3020M	RQ*5MP3020M
		Curve 3.0cm	2	80 cm	RQ*4MP3028M	-
		Curve 3.5cm	2	100 cm	RQ*4MP3520M	RQ*5MP3520M
Internal Mammary		-	0	100 cm	RQ*4BPIN00M	RQ*5BPIN00M
		-	0	100 cm	-	RQ*5BPIR00M
Bypass		Judkins Left	0	100 cm	RQ*4BPJL00M	RQ*5BPJL00M
		Judkins Right	0	100 cm	RQ*4BPJR00M	RQ*5BPJR00M
Straight Pigtail		-	8	120 cm	RQ*4SP0082M	RQ*5SP0082M
		-	8	110 cm	RQ*4SP0081M	RQ*5SP0081M
		-	8	80 cm	RQ*4SP0088M	RQ*5SP0088M
Angled Pigtail		145°/5.5cm	8	110 cm	RQ*4AP4581M	RQ*5AP4581M
		155°/5.5cm	8	110 cm	RQ*4AP5581M	RQ*5AP5581M
		155°/2.0cm	4	110 cm	RQ*4APR241M	RQ*5APR241M
Brachial Type (Tiger)		Curve 4.0cm	1	120 cm	-	RQ*5TIG112M
		Curve 4.0cm	1	100 cm	RQ*4TIG110M	RQ*5TIG110M
		Curve 4.0cm	1	80 cm	RQ*4TIG118M	RQ*5TIG118M

Số lưu hành: 2100095ĐKXH/BJT-TB-CT

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 036/24-CKQC-Terumo



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 24 3936 1643

Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Điện thoại: +84 28 6660 0326