



NavicrossTM

Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi

LỰA CHỌN ĐẦU TAY
**CATHETER HỖ TRỢ
CAN THIỆP MẠCH MÁU
NGOẠI VI**

**TERUMO**
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

Navicross™

Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi

TRỤC BÊN KÉP THÉP KHÔNG GỈ

- Dễ dàng lái và truyền lực hiệu quả trong các mạch máu phức tạp
- Tăng cường khả năng xoay và chống xoắn.

ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU VÀO NHỎ VÀ VƯỢT THON ĐẦU TIP


- Chuyển tiếp mượt mà giữa dây dẫn và catheter giúp dễ dàng tiếp cận và vượt qua tổn thương
- Kiểu đầu cong giúp lựa chọn đúng lòng mạch và lái qua những mạch máu phân nhánh.

BA ĐIỂM ĐÁNH DẤU CẢN QUANG

- Dễ quan sát giúp đo nội mạch chính xác (đánh giá kích thước/ vị trí đặt bóng và stent), nhờ các điểm đánh dấu cản quang được đặt cách đầu xa 1 mm - cách dải đánh dấu trước đó 40 mm và 60 mm.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Trục bên kép thép không gỉ
- Chiều dài 65, 90, 135, 150 cm
- Tương thích dây dẫn 0.035" / 0.89 mm
- 1 điểm đánh dấu cản quang gần chیم và 2 điểm đánh dấu cản quang đứс
- Kiểu đầu Thẳng và Cong 30°
- Tương thích sheath mở đường 4 Fr

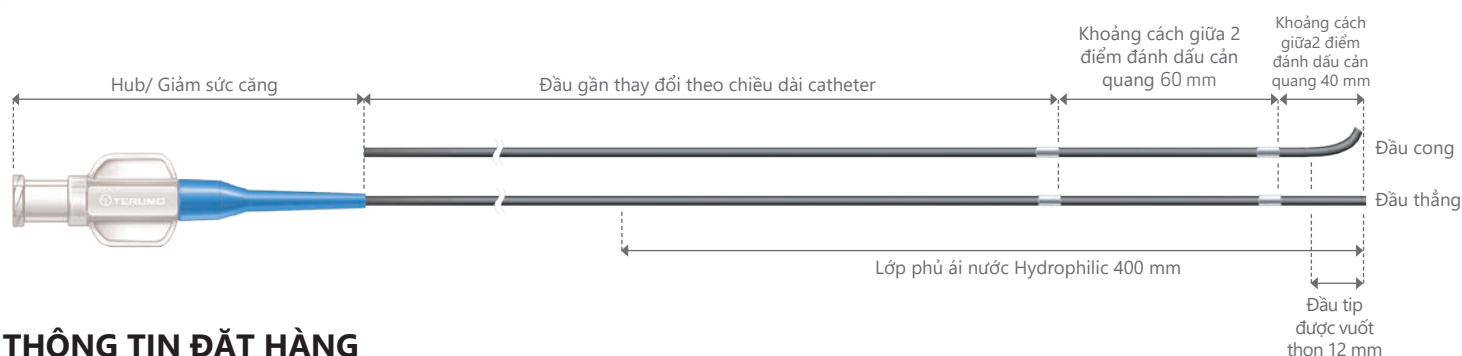

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

	Dây dẫn tương thích 0.035" / 0.89 mm	65 cm	90 cm	135 cm	150 cm
Kiểu đầu	Thẳng	WS*NS350G3HM	WS*NS35093HM	WS*NS350N3HM	WS*NS35153HM
	Cong	WS*NA350G3HM	WS*NA35093HM	WS*NA350N3HM	WS*NA35153HM



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 24 3936 1643

Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 240002183/PCBB-HN

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 042/24-CKQC-Terumo