



Navicross[™]

Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi

LỰA CHỌN HIỆU QUẢ
**CATHETER HỖ TRỢ
CAN THIỆP MẠCH MÁU
NGOẠI VI**

 **TERUMO**
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

NaviCross™

Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi

TỰ TIN THAO TÁC TRONG CÁC QUY TRÌNH PHỨC TẠP

NaviCross 0.035"


Hỗ trợ đáng tin cậy để vượt qua tổn thương

NaviCross 0.018"

Hỗ trợ tổn thương xa hơn, phức tạp hơn

Trục bên kép thép không gỉ

Được thiết kế nhằm tăng cường khả năng đẩy và kiểm soát mô-men xoắn để vượt qua tổn thương¹

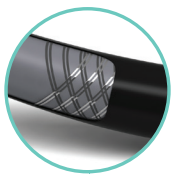

Catheter 0.035"

Catheter 0.018"

Đầu thẳng và đầu cong

Đầu tip cho phép tiếp cận các mạch máu nhánh, bao gồm cả các mạch máu phụ dưới gối¹



Khả năng lồng ống (Telescoping)


NaviCross 0.018" được thiết kế để lồng vào bên trong NaviCross 0.035"¹

Catheter 0.035"

Catheter 0.018"

Vuốt thon đầu tip

Giúp chuyển tiếp mượt mà giữa dây dẫn và catheter, hỗ trợ dễ dàng tiếp cận và vượt qua tổn thương¹

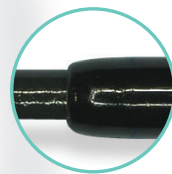


Ba điểm đánh dấu cản quang¹

- Các điểm đánh dấu hỗ trợ xác định chính xác vị trí
- Khoảng cách chuyên biệt giúp dễ dàng đo kích thước stent và bóng thông dụng
- Điểm đánh dấu đầu tiên cách đầu xa 1 mm; khoảng cách giữa các điểm là 40 mm và 60 mm

Hỗ trợ dây dẫn chắc chắn¹

Chuyển tiếp mượt mà giữa dây dẫn và catheter giúp tăng cường khả năng hỗ trợ dây dẫn, dễ dàng vượt qua tổn thương


Được thiết kế với khả năng hỗ trợ dây dẫn ấn tượng

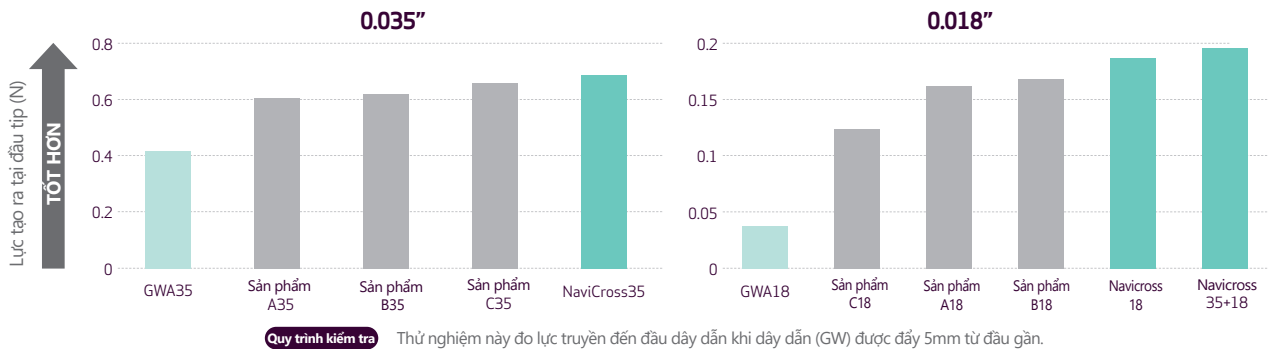

Truyền lực hiệu quả¹

Thiết kế bện kép thép không gỉ xuyên suốt toàn bộ chiều dài thiết bị, mang lại độ cứng tối ưu mà không gặp phải nhược điểm của việc vượt thon giữa đầu xa - đầu gần.


Được thiết kế với khả năng truyền lực ấn tượng

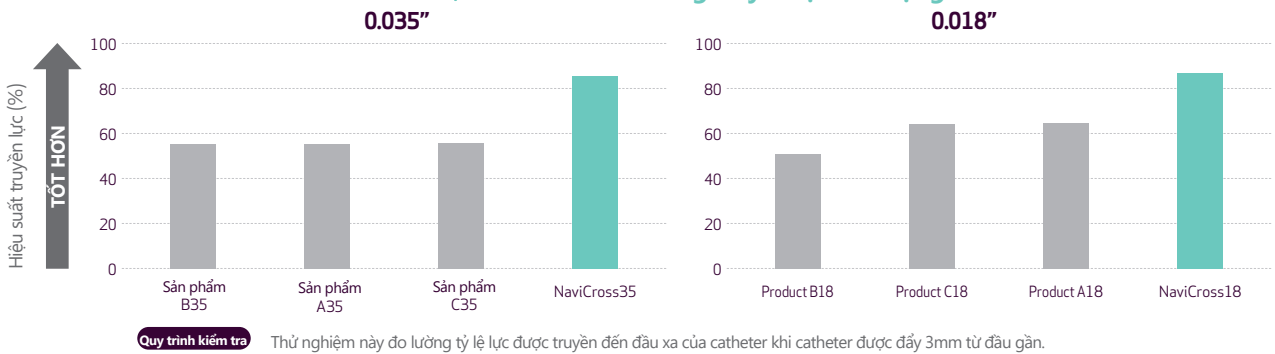

Dễ dàng vượt qua tổn thương¹

Lớp phủ ái nước và thiết kế vượt thon đầu tip giúp dễ dàng vượt qua cả các tổn thương đơn giản hoặc phức tạp.

Được thiết kế với khả năng vượt qua tổn thương ấn tượng

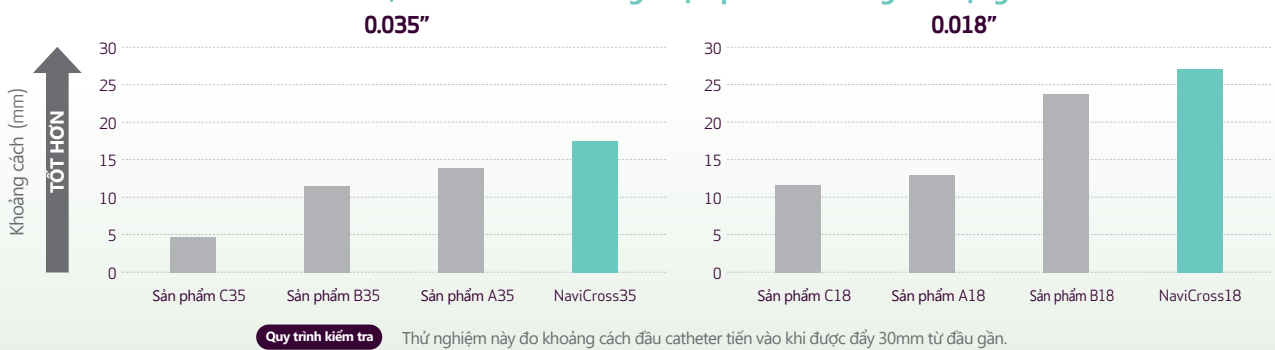


Thông số sản phẩm

NaviCross™
Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi


Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi 0.035"

MÃ SẢN PHẨM	DÂY DẪN TƯƠNG THÍCH	CHIỀU DÀI CATHETER	Kiểu Đầu
WS*NS350G3HM	0.035"	65 cm	Thẳng
WS*NA350G3HM	0.035"	65 cm	Cong (30°)
WS*NS35093HM	0.035"	90 cm	Thẳng
WS*NA35093HM	0.035"	90 cm	Cong (30°)
WS*NS350N3HM	0.035"	135 cm	Thẳng
WS*NA350N3HM	0.035"	135 cm	Cong (30°)
WS*NS35153HM	0.035"	150 cm	Thẳng
WS*NA35153HM	0.035"	150 cm	Cong (30°)

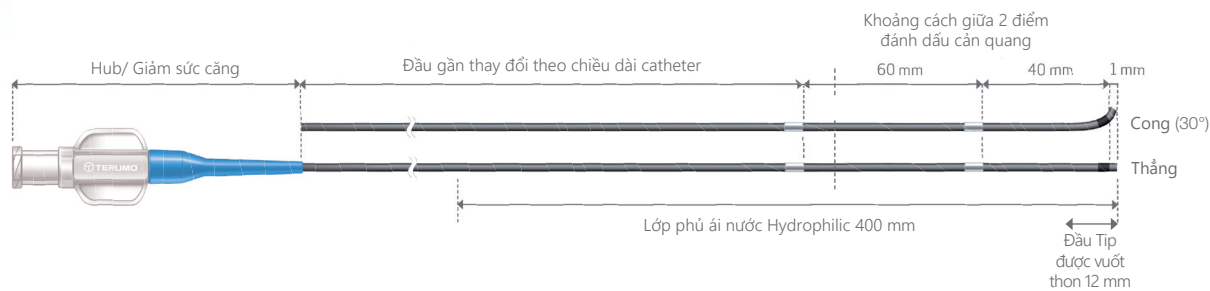

Catheter hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi 0.018"

MÃ SẢN PHẨM	DÂY DẪN TƯƠNG THÍCH	CHIỀU DÀI CATHETER	Kiểu Đầu
PN*NS180G3HM	0.018"	65 cm	Thẳng
PN*NA180G3HM	0.018"	65 cm	Cong (30°)
PN*NS18093HM	0.018"	90 cm	Thẳng
PN*NA18093HM	0.018"	90 cm	Cong (30°)
PN*NS180N3HM	0.018"	135 cm	Thẳng
PN*NA180N3HM	0.018"	135 cm	Cong (30°)
PN*NS18153HM	0.018"	150 cm	Thẳng
PN*NA18153HM	0.018"	150 cm	Cong (30°)

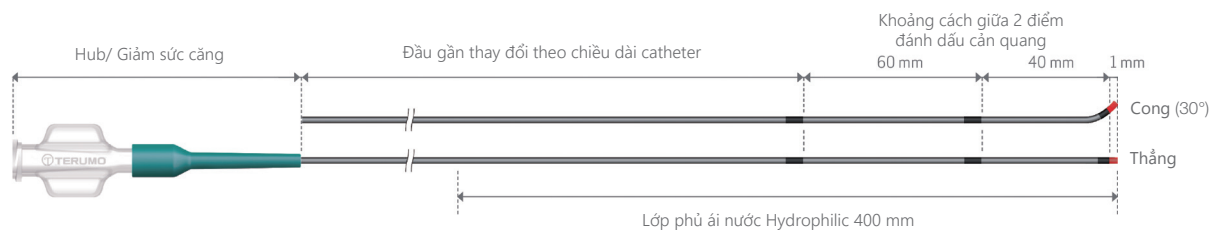

Số lưu hành: 240002183/PCBB-HN và 250002232/PCBB-HN
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation
Sản xuất tại: Nhật Bản
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 133, 134/25-CKQC-Terumo



Terumo Asia Holdings Pte. Ltd.
+65 6295 1792

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326