




CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

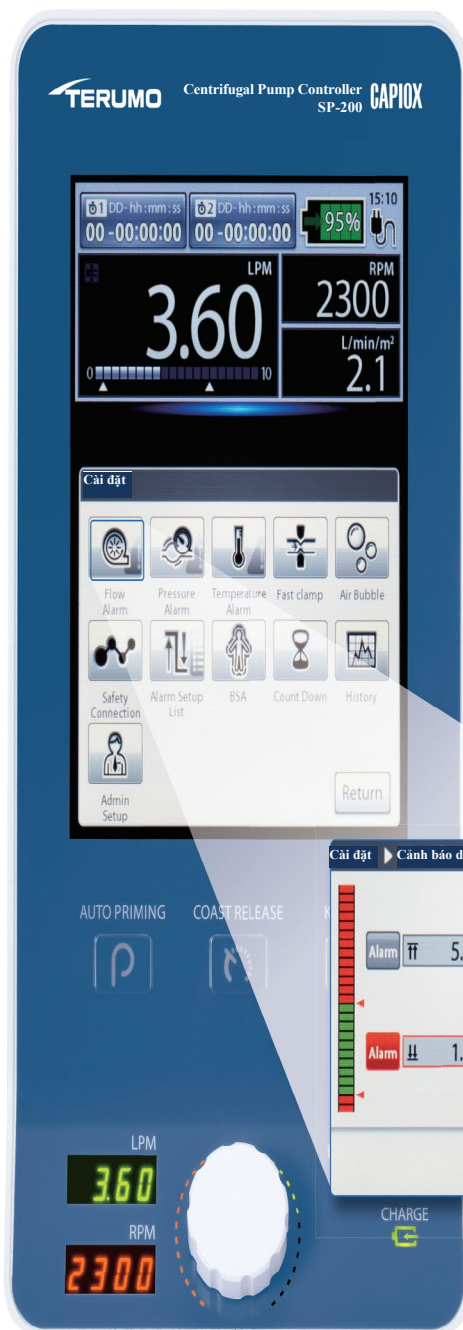

[Chuông và hệ thống cảnh báo]

Thông báo ngay tức phát hiện bong khí và thay đổi lưu lượng, áp suất và nhiệt độ khi có chuông báo.



[Chức năng lưu trữ dữ liệu]
Lịch sử của dữ liệu có thể được kiểm tra trên biểu đồ xu hướng và danh sách các sự kiện. Dữ liệu có thể được xuất sang thẻ nhớ thông qua cổng USB.



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326



Phổi nhân tạo dùng cho máy ECMO

CAPIOX EBS™ Circuit with SL45 Pump


CAPIOX EBS™
Emergency Bypass System

Xcoating™



Đặc điểm đầu bơm ly tâm CAPIOX SL45

- Thiết kế trực đối cho độ bền lâu hơn.
Sinh nhiệt thấp, dẫn đến ít tổn thương máu và tỷ lệ tiêu huyết thấp.
- Thiết kế sáu đường thẳng duy nhất giúp đạt lưu lượng hiệu quả với RPM thấp
- Tương thích với Thiết bị điều khiển bơm ly tâm CAPIOX SP101 và SP-200
- Mạ bề mặt Xcoating

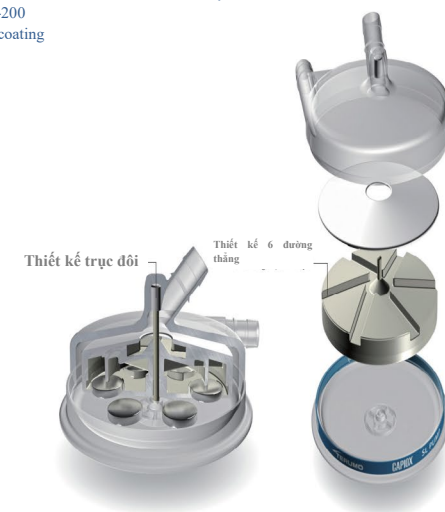

Thông số kỹ thuật phổi nhân tạo

■ dùng cho máy ECMO CAPIOX EBS Circuit with SL45 Pump

CAPIOX EBS Circuit with SL45 Pump		
Mã sản phẩm	CX*XA0171	CX*XA0251
Thể tích máu	620ml	740ml
Chiều dài dây dẫn động mạch và tĩnh mạch (mỗi dây)	1.7m	2.5m
Lưu lượng máu tối đa	7L/phút	
Áp suất hoạt động tối đa	1,000 mmHg (133 kPa)	
Lưu lượng máu cho động mạch và nối ống thông tĩnh mạch	Dầu nối có khóa	Không có dầu nối
Máy thở oxy		
Diện tích bề mặt màng lọc/vật liệu	Xấp xỉ 2.5 m ² polyethylene	
Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt (hiệu suất) / vật liệu	Xấp xỉ 0.22 m ² /thép không gỉ	
Cỡ nẹp khí	1/4" (6.4mm)	
Nhiệt điện trở	Lỗ thông huyết	
Lỗ thoát nước	1/2" (12.7mm) Phụ kiện kết nối nhanh Hansen	
Bơm ly tâm		
Tốc độ tối đa	3,000 RPM	
Áp suất xả tối đa	800 mmHg (107 kPa)	

Số lưu hành: 2402964ĐKLH/BYT-HTTB và 2402721ĐKLH/BYT-HTTB

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa,
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Ashtaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 060/25-CKQC-
Terumo và 061/25-CKQC-Terumo