

Phin lọc động mạch **CAPIOX® Arterial Filter**



Thể tích mỗi thấp

125mL


Lưu lượng dòng cao

7L/Phút

**Hiệu quả cao với thể tích dịch mỗi nhỏ hơn -
một sản phẩm từ quá trình cải tiến liên tục của Terumo**

with **Xcoating®**

Cải tiến liên tục cho hệ thống mạch tuần hoàn ngoài cơ thể

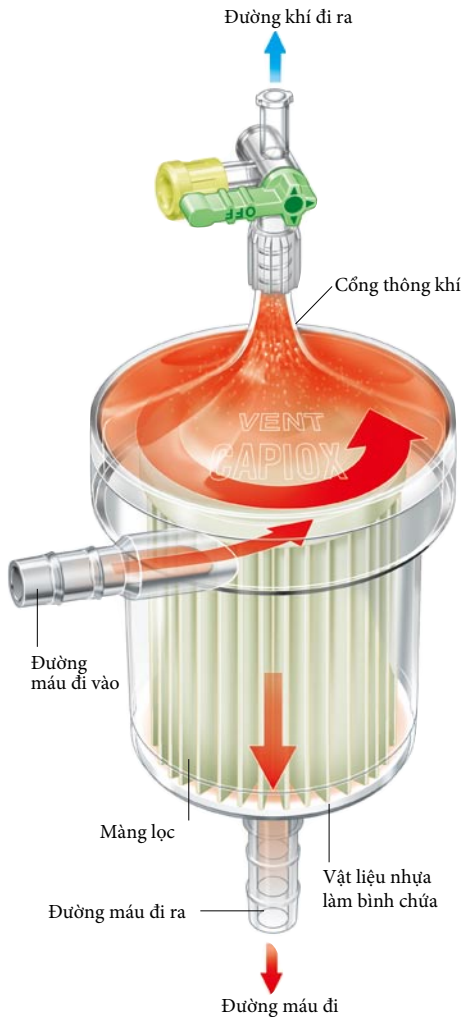

■ Hiệu quả cao với thể tích dịch mỗi nhỏ hơn

Phin lọc động mạch CAPIOX AF125 Arterial Filter cung cấp dòng máu đủ lưu lượng 7L/phút chỉ với 125mL dịch mỗi giúp giảm pha loãng máu.

■ Vô trong suốt

Phin lọc động mạch với toàn bộ lớp vô trong suốt giúp các chuyên viên y tế dễ dàng kiểm tra bọt khí trong quá trình mổ.



● Với trẻ sơ sinh

Phin lọc động mạch CAPIOX AF02 Pediatric Arterial Filter có khối lượng mỗi thấp, loại bỏ bọt khí tốt và vận hành dễ dàng. (Có sẵn dạng không có lớp phủ.)

■ Chất lượng lọc cao

Phin lọc động mạch CAPIOX AF125 Arterial Filter dùng lực ly tâm để tăng hiệu quả loại bỏ bọt khí khỏi dòng máu. Vật liệu lọc giúp loại bỏ hiệu quả các tập hợp nhỏ và bọt khí li ti, trong khi giảm tối thiểu tổn thương các thành phần khác trong máu.

Lớp phủ bề mặt polymer ưa nước tương thích sinh học mới



Lớp phủ Terumo's X Coating giúp giảm tổn hại tiểu cầu và biến tính protein

■ Thông số kỹ thuật

		Dùng cho người lớn	Dùng cho trẻ em
Số thứ tự đặt hàng		CX*AF125X	CX*AF02
Vật liệu	Bình chứa	Polycarbonate	
	Lọc tĩnh mạch	Polyester kiểu lưới	
	Kích thước lỗ màng lọc	37µm	32µm
Kích thước	Đường máu vào/ra	3/8" (10mm)	1/4" (6.4mm)
	Cống thông khí	Cống loại Female luer	
Thể tích mỗi máu		125mL	40mL
Giảm áp suất (lưu lượng máu)		4.8kPa (36mmHg) (7L/ph.)	3.3kPa (25mmHg) (2.5L/ph.)
Lưu lượng tối đa		7 L/ph.	2.5L/ph.
Mã của giá đỡ		XX*XH041	



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan
Phone: 81-3-3374-8111 Fax: 81-3-3374-8399

TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION
6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103-9300, U.S.A.
Phone: 734-663-4245
Fax: 734-741-6181

TERUMO EUROPE Cardiovascular Systems
Hauptstr. 87, 65760 Eschborn (Taurus), Germany
Phone: 49-6196-8023-500
Fax: 49-6196-8023-555

TERUMO EUROPE N.V. Brussels Headquarters
Researchpark Zone 2 Haasrode Interleuvenlaan 40 B-3001 Leuven, Belgium
Phone: 32-16-38-12-11
Fax: 32-16-40-02-49

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số công bố: 230002137/PCBB-HN

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 067/25-CKQC-Terumo