

NANOPASS[®] 32.5G 4mm 6mm 8mm

Kim dành cho bút tiêm
Phù hợp cho tất cả các loại bút tiêm (Loại A)



Thông số kỹ thuật Nanopass [®] 32.5G (Ø 0.22 mm)			
Chiều dài kim tiêm	4 mm	6 mm [▲]	8 mm
Mã sản phẩm	TN*32504M	TN*32506M	TN*32508M
PZN	04706748	—	04706754
Quy cách đóng gói	100 kim/hộp	100 kim/hộp	100 kim/hộp

[▲]Có mặt trên thị trường vào năm 2014

"LOẠI A" ISO 11608-2 CE 0197 LATEX



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số công bố: 250002003/PCBB-HN

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam

NANOPASS[®]

Đầu kim cho bút tiêm Insulin và Hormon tăng trưởng

Một kích cỡ phù hợp cho tất cả bút tiêm

Cho tất cả bệnh nhân
32.5G
NANOPASS[®]
4mm 6mm 8mm



- Kim tiêm với đầu vát không đối xứng độc đáo.
- Được thiết kế để giảm đau.
- Sử dụng công nghệ hàng đầu cho mỗi bệnh nhân.



Nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi bệnh nhân

NANOPASS®

Tiêm thoải mái hơn mỗi ngày

Một kích cỡ kim cho tất cả bút tiêm

- Kim tiêm NANOPASS® 32.5-G có ba độ dài khác nhau luôn có lựa chọn tối ưu cho mỗi tốp bệnh nhân.
- Terumo đã vận dụng kiến thức về giảm đau lúc tiêm khi thiết kế kim tiêm Nanopass 32.5. Người dùng kim tiêm dài cũng sẽ được hưởng lợi.
- Mã màu giúp nhận biết chiều dài của kim bút tiêm thích hợp một cách dễ dàng.



▲ Có mặt trên thị trường vào năm 2014

NANOPASS® 32.5 mang lại sự tiện lợi cho bệnh nhân đang sử dụng insulin dạng tiêm bằng cách áp dụng các công nghệ độc quyền của Terumo:


- 1 Kim tiêm có đầu vát không đối xứng
- 2 Thân kim tiêm đặc biệt mỏng
- 3 Công nghệ thiết kế thành kim mỏng của Terumo



Kim tiêm hoàn hảo cho mọi bệnh nhân

1 Kim tiêm với đầu vát không đối xứng


Thiết kế kim tiêm với đầu vát không đối xứng độc đáo của NANOPASS® xuyên qua da bằng cách cắt thay vì đâm thủng. Điều này làm giảm kháng lực khi qua da – thiết kế giúp giảm đau.

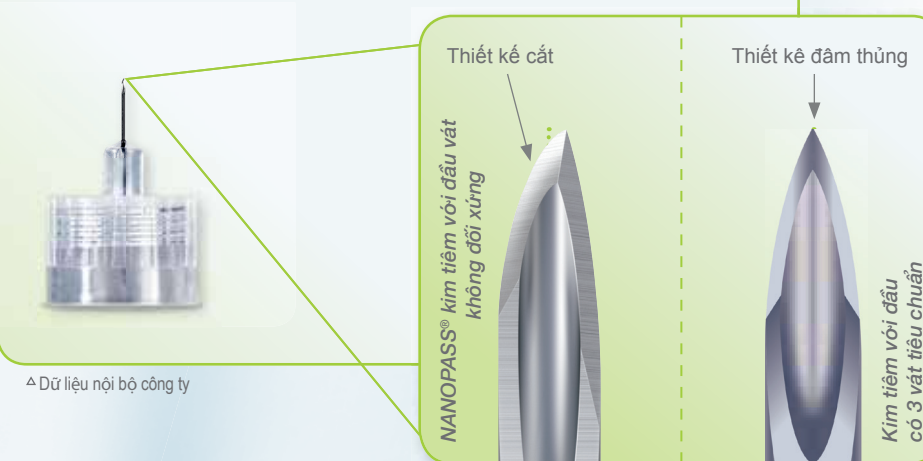

▲ Dữ liệu nội bộ công ty

2 Thân kim dành cho bút tiêm đặc biệt mỏng

Thân kim tiêm đặc biệt mỏng, chỉ 32.5G (0.22 mm) giảm tổn thương da so với kim tiêm với kích cỡ lớn hơn.

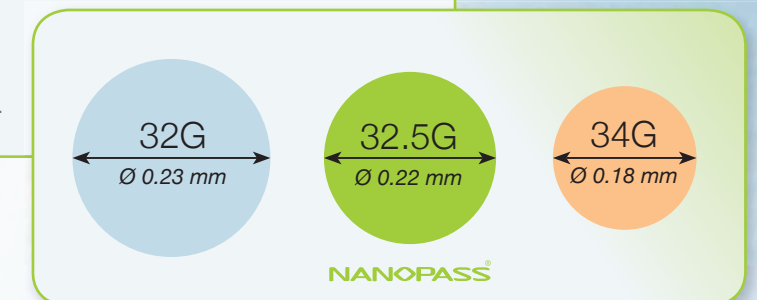

3 Terumo - công nghệ thiết kế thành kim mỏng

Đường kính bên trong rộng của NANOPASS® 32.5, tối ưu hóa lưu lượng insulin, giúp tiêm insulin dễ dàng hơn.

