


Bộ dây truyền dịch TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch được thiết kế riêng biệt để sử dụng cùng với bơm truyền dịch của TERUMO để có thể vận hành một cách an toàn và tối ưu.

Dây có các đặc tính cần thiết cho các bộ dây truyền dịch dùng cho máy bơm truyền dịch

Đường kính ống đồng đều

Đường kính ống được giới hạn trong một phạm vi nhất định để phù hợp với cơ chế điều tiết lưu lượng của bơm.

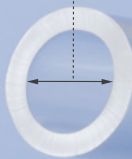

Độ cứng và mềm dẻo phù hợp

Dây được thiết kế với độ dẻo và cứng chắc vừa đủ (nếu dây có độ dẻo và cứng không phù hợp có thể ảnh hưởng đến lưu lượng và áp lực bảo tắc nghẽn).

Độ bền

Dây truyền dịch với mục tiêu được sử dụng với máy truyền dịch nên cần có độ bền thích hợp để có thể hoạt động tốt trong khoảng thời gian được sử dụng (nếu độ bền không đảm bảo có thể làm biến dạng dây và làm sai lệch lưu lượng).

Giữ vững hình dạng ngay cả khi nhiệt độ thay đổi

Dây được thiết kế để có thể chống lại được các thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến độ cứng chắc của dây - đặc biệt với sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm gia tăng khả năng xảy ra lỗi liên quan đến lưu lượng và áp lực bảo tắc nghẽn.

TERUFUSION™

Bơm truyền dịch loại LM3 TE-LM830
Kiểu Midpress™



TERUFUSION™

Bơm truyền dịch loại LM3 TE-LM730
Kiểu Midpress™



Không phải tất cả các thông số được miêu tả trong catalog này đã được đăng ký và chấp thuận để được bán ở tất cả các quốc gia và khu vực. Chỉ định sử dụng có thể thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực. Xin vui lòng liên hệ nhà phân phối tại khu vực để biết thêm chi tiết.



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP.HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Tất cả các tên thương hiệu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của TERUMO CORPORATION và chủ sở hữu tương ứng của chúng
©TERUMO CORPORATION April, 2020.

TVME-2408-054

Số lưu hành: 2100469ĐKLH/BYT-TB-CT; 220000917/PCBB-BYT và 220000288/PCBB-BYT

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.

Sản xuất tại: Trung Quốc

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 016/24-CKQC-Terumo; 017/24-CKQC-Terumo và 021/24-CKQC-Terumo





Dây truyền dịch (dùng cho máy truyền dịch) và Dây truyền máu (dùng cho máy truyền dịch)

TERUFUSION™

I Dây không sử dụng DEHP

Vật liệu dây: PVC
Tất cả sản phẩm dây truyền dịch của TERUMO đều không sử dụng DEHP là một chất hóa dẻo có chứa thành phần độc hại.

I Kẹp chống chảy tự do (AFF)

- Kẹp AFF có thể ngăn việc xảy ra hiện tượng chảy tự do bất ngờ.
- Kẹp AFF phải được gắn vào vị trí cụ thể trên các loại bơm truyền dịch của Terumo và tự động kẹp dây ngay cả khi dây được tháo ra khi chưa được kẹp.




I Các dạng lưới lọc (tùy chọn)

Lọc 0.2, 15 hoặc 40µm

I Ống dây màu hổ phách

Sử dụng với các loại thuốc yêu cầu phải tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp.

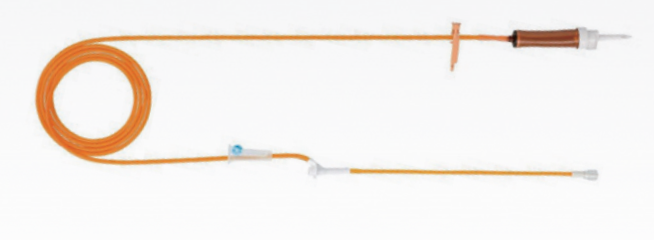

Thông số kĩ thuật

Bộ dây truyền dịch TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch		
TI*PU200L	Không có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 40µm Đầu nối dạng trượt Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 213cm	
TI*PU300W	Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 15µm. Đầu nối dạng xoắn Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 215cm	
TI*PU300WY	Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 15µm, Kẹp AFF, Đầu nối dạng xoắn Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 215cm	
TI*PU300WN01	Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 15µm, 1 cổng chích thuốc, Đầu nối dạng xoắn Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 244cm	

Thông số kĩ thuật

Bộ dây truyền máu TERUFUSION dành cho bơm truyền dịch		
TB*PU300L	Không có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 175-210µm Đầu nối dạng xoắn, Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 219cm	
TB*PU300W	Có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 175-210µm Đầu nối dạng xoắn Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP Tổng chiều dài: 222cm	
TB*PU300SYE	Không có van thông khí, 20 giọt/ml, lọc 175-210µm Kẹp AFF, Kẹp điều chỉnh, Đầu nối dạng xoắn, Vật liệu PVC, Không sử dụng DEHP. Tổng chiều dài: 242cm	