

Thời gian chất lượng để chăm
sóc tốt hơn

"Thời gian chất lượng để chăm sóc tốt hơn" là lời cam
kết của Terumo Medical Care Solutions cho tất cả mọi
người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe



Digitally signed by
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ
Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
DN: c=VN, st=THÀNH
PHỐ HÀ NỘI, cn=CÔNG
TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ
TERUMO VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100,
1.1=MST:0105881933
Date: 2025.09.05
11:39:47 +07'00'
Adobe Acrobat version:
2025.001.20643

TERUMO
MEDICAL CARE
SOLUTIONS

Chăm sóc bệnh viện

SURPLUG™ AD series

Hệ thống truyền dịch kín



Áp dụng cho nhiều khoa/phòng
và tình huống khác nhau

Dòng sản phẩm **SURPLUG AD** Giúp hệ thống truyền dịch an toàn và đơn giản hơn đáp ứng nhu cầu ở các khoa/phòng khác nhau



Dòng sản phẩm **SURPLUG AD**

<Cổng kết nối có vách ngăn>

----- [2 đặc điểm chính] -----

Không cần bộ

kết nối chuyên dụng

Cả ống tiêm đầu trượt và đầu khoá đều có thể được kết nối mà không cần bộ chuyển đổi kết nối.

Ít bộ phận kết nối hơn cho phép thao tác nhanh hơn và giảm nguy cơ từ việc tháo lắp các bộ phận rời.



Đầu Trượt




Đầu Khoá

Cấu tạo đặc biệt của Terumo

loại bỏ dư lượng thuốc

Việc mồi dịch được thực hiện đơn giản hơn mà không cần đuổi khí. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc dùng liều nhỏ.

Cổng chữ T

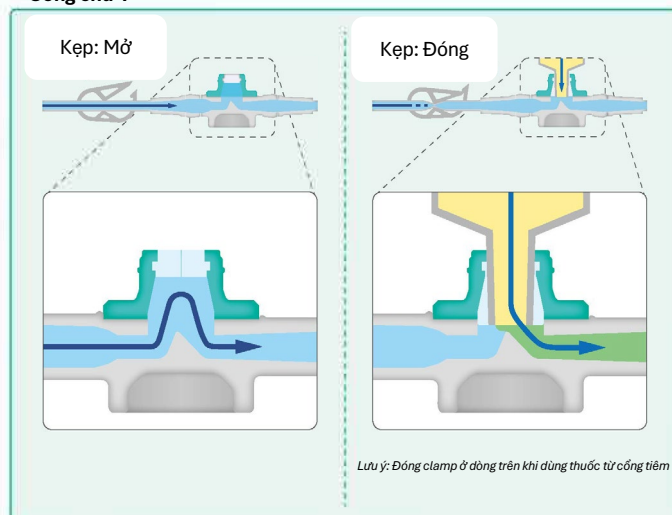

● : Cấp cứu ● : Phòng mổ ● : ICU ● : Khoa tổng hợp và Nhi khoa ● : Chăm sóc tại nhà và Cộng đồng

Dòng sản phẩm SURPLUG AD

[Điểm đặc trưng]

Mặt trên phẳng để dàng lau khử trùng

Mặt trên phẳng với một khe nhỏ giữa van và cho phép cọ rửa dễ dàng hơn và giảm nguy cơ các vật thể lạ xâm nhập trong khi tiêm thuốc.



Lưu ý: Luôn sát khuẩn cổng tiêm trước khi tiêm thuốc, lấy máu hoặc truyền máu.

Sử dụng vật liệu chất lượng cao cho hệ thống

Van được làm bằng cao su silicone và vỏ bằng polypropylene, ống không chứa PVC, cho phép sử dụng thuốc không chọn lọc.



Thiết kế tập trung vào khả năng hiển thị

Đầu nối thiết kế trong mờ cho phép dễ dàng theo dõi dòng chất lỏng.



Kênh với dòng chảy màu đỏ

Kết nối với ống tiêm đầu trượt (Slip)

Được cấu trúc để giúp giảm hiện tượng giật ngược của ống tiêm trượt trong quá trình kết nối.

Khả năng tương thích với máy bơm truyền dịch Terumo

Bộ SURPLUG AD Solution Administration tương thích với máy bơm truyền dịch của Terumo.

(1) Đường kính trong và ngoài của ống được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo độ chính xác của tốc độ dòng máy bơm.

(2) Bề mặt ống được phủ một lớp silicon để tăng khả năng dễ dàng gắn vào máy bơm.

Cấu trúc cho tốc độ dòng chảy cao

Dòng SURPLUG AD có cấu trúc độc đáo để đầu ống tiêm được đưa trực tiếp vào van, đảm bảo tốc độ dòng chảy cao của thuốc hoặc chất lỏng. Điều này rất hữu ích khi cần tăng tốc độ dòng chảy trong phòng mổ, v.v.

Áp dụng cho truyền máu

SURPLUG AD Đầu nối không kim và SURPLUG AD Manifold có thể được sử dụng để truyền máu vào đường động mạch.



Cổng nối không kim SURPLUG AD



SURPLUG AD Manifold

Chức năng khóa một nửa




Bằng cách vận nó thành Half-lock (như hình bên), dòng chảy của dung dịch thuốc từ tất cả các hướng có thể tạm thời dừng lại.



Khoá nửa được thiết lập

Dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu

Một loạt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong các tình huống khác nhau có sẵn, bao gồm: Đầu nối không kim SURPLUG AD Needle-Free Connector, Cổng tiêm không kim có dây nối dài SURPLUG AD Extension tube, Bộ SURPLUG AD Solution Administration và Khóa ba chạc SURPLUG AD Three-way Stopcock

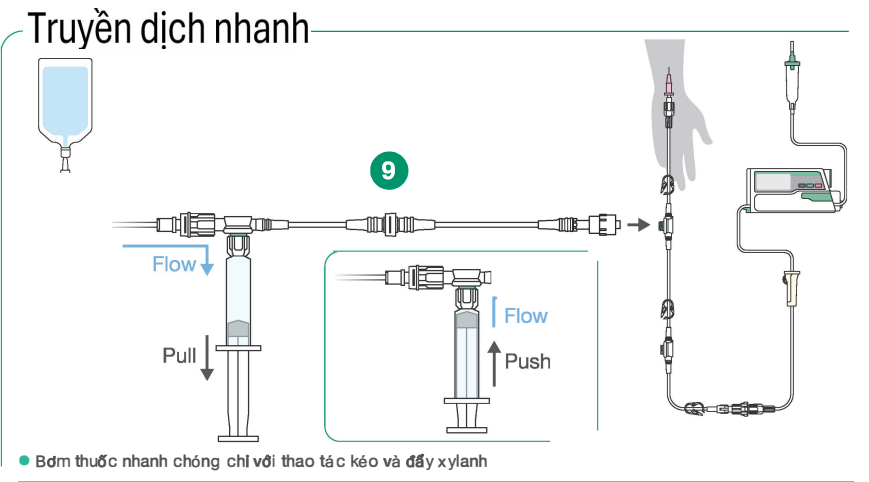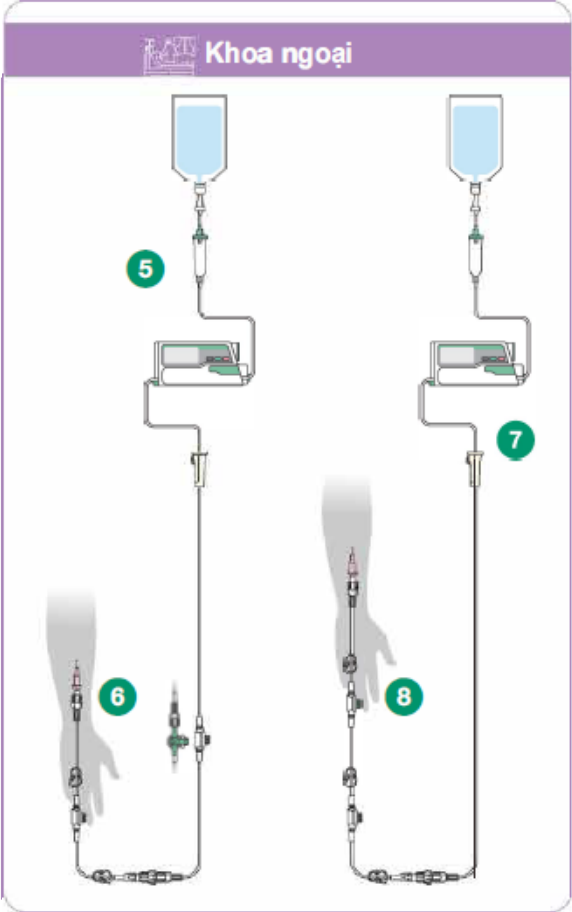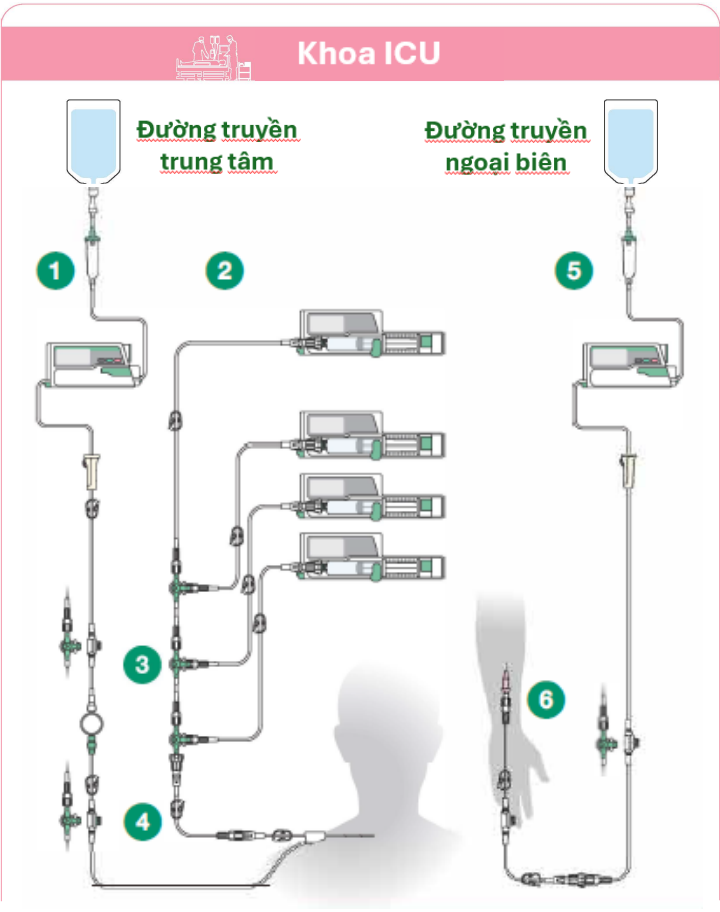

Số	Mã sản phẩm	Nhóm sản phẩm
1	SA*QTF302NN *	6927675509512
2	SA*ET195100A	6927675510198
3	SA*3TR3	6927675510426
4	SA*ET203100	6927675510235
5	SA*QTT301MN *	6927675509581
6	SA*ET206101	6927675510259
7	TI*PU300LY	6927675506931
8	SA*ET209102Z	6927675510365
9	SA*FT2064V0Z	6927675510372
10	SA*ET5A0700	6927675510389

* Lưu ý: Chúng tôi chỉ công khai nội dung và hình thức quảng cáo với những sản phẩm đã được cấp số lưu hành tại Việt Nam, không bao gồm sản phẩm SA*QTF302NN và SA *QTT301 MN

Có nhiều thông số kỹ thuật khác. Bất cứ thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

TERUMO
Marketed by TERUMO CORPORATION

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi
nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số đăng ký lưu hành: 2100469DKLH/BYT-TB-CT và 220000410/PCBB-BYT
Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt
Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Đống Đa, Hà
Nội, Việt Nam.
Nhà sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.
Sản xuất tại: Trung Quốc
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 119/25-CKQC-
Terumo và 120/25-CKQC-Terumo